

Диагностический центр HEINE EN 200

Современная энергосберегающая настенная система



[01]



- ✦ **Отличная энергоэффективность.** Более низкое энергопотребление снижает расходы и вред для окружающей среды.
- ✦ **Одновременное использование рукояток.** Оптимальная работа рукояток со светодиодным и/или ксенон-галогеновым освещением. Благодаря гальванической развязке, два врача могут использовать приборы для обследования независимо друг от друга.
- ✦ **Многочисленные диагностические возможности.** Совместим со всеми приборами HEINE (с освещением LED или XHL) с коннектором AV.
- ✦ **Максимальная безопасность для пользователя и пациента.** Встроенная гальваническая развязка защищает рукоятки от нежелательных электрических контактов.
- ✦ **Простая очистка.** Плоский компактный корпус без каких-либо отверстий обеспечивает возможность оптимальной гигиенической обработки. Отсутствие механических переключателей снижает риск перекрестного загрязнения.
- ✦ **Функция готовности к использованию.** Благодаря передовым технологиям HEINE EN 200, рукоятки автоматически включаются и выключаются при снятии или возвращении в настенный блок. Установите уровень яркости один раз, и настройка сохранится при каждом включении прибора. Освещение автоматически выключается, если рукоятка не используется более 15 минут и не возвращена в настенный блок.
- ✦ **Полная совместимость.** Устройство оснащено портом USB и может быть дополнено модулями HEINE, например, EN 200-1.
- ✦ **Технология Soft Start** защищает лампы в критической фазе включения (предотвращает толчок тока) и продлевает срок службы лампы.
- ✦ **Бесступенчатая регулировка яркости** от 3% до 100% для ксенон-галогенового (XHL) и светодиодного (LED) освещения.
- ✦ **Встроенная система защиты от кражи** предотвращает несанкционированное отсоединение инструментальной головки с помощью фиксирующего винта.
- ✦ **Блок EN 200-1.** Используется в качестве дополнительного блока либо при необходимости установки только одного инструмента. [01]
Больше информации – на стр. 130.

Диагностический центр HEINE EN 200 в комплекте

С аналоговым сфигмоманометром GAMMA XXL LF-WB



Диагностический центр EN 200 с GAMMA XXL LF-WB

Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-WB	
Корзина для манжет	
Настенный трансформатор EN 200	
Отоскоп BETA 400 LED F.O.	
Офтальмоскоп BETA 200 LED	
Диспенсер для воронок AllSpec	
Настенная монтажная панель (крепёж прилагается)	A-095.12.950
Аналогично комплекту выше, но с отоскопом BETA 200 LED F.O.	A-095.12.951

Наборы для диагностического центра HEINE EN 200



[01]

Наборы EN 200 *	3.5V
С настенным трансформатором EN 200, отоскопом BETA 400 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED [01]	LED A-095.12.218
С настенным трансформатором EN 200, отоскопом BETA 400 F.O., офтальмоскопом BETA 200	XHL A-095.12.214
С настенным трансформатором EN 200, отоскопом BETA 200 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED	LED A-095.12.219
С настенным трансформатором EN 200, отоскопом BETA 200 F.O., офтальмоскопом BETA 200	XHL A-095.12.215
С настенным трансформатором EN 200, отоскопом K180 F.O., офтальмоскопом K180	XHL A-095.12.220

* без дополнительных принадлежностей

Набор для дерматоскопии HEINE EN 200-1



	LED
Дерматоскоп DELTA 20T с контактной платой со шкалой, настенный трансформатор EN 200-1 (одинарный блок с одной рукояткой) для отдельного использования с длинным USB- кабелем и сетевым адаптером E4-USB	K-010.28.252





Диагностический центр HEINE EN 200 – индивидуальный

Соберите свой индивидуальный диагностический центр: настенный трансформатор EN 200 и дополнительные компоненты, такие как диспенсер воронок AllSpec и сфигмоманометр GAMMA XXL, могут быть собраны в единую модульную систему. Вы также можете выбрать нужные Вам инструменты (в версиях XHL 3,5 В или LED) из ассортимента HEINE и собрать собственный диагностический центр, исходя из Ваших индивидуальных потребностей.



Настенный трансформатор EN 200* [01]	X-095.12.250
Настенный трансформатор EN 200-1* (блок расширения под одну рукоятку) для использования с настенным трансформатором EN 200 (с коротким USB-кабелем) [02]	X-095.12.251
Настенный трансформатор EN 200-1* (блок расширения под одну рукоятку) в качестве одинарного модуля с длинным USB-кабелем и сетевым адаптером E 4-USB [02]	X-095.12.252
Диспенсер для воронок AllSpec, для EN 200 [03]	B-000.11.149
Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W [04]	M-000.09.323
Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-WB (без держателя для манжеты) [05]	M-000.09.327
Корзина для хранения манжет [06]	M-000.09.140
Монтажная панель для комбинации EN 200 / диспенсер воронок [07]	X-095.12.006
Монтажная панель для комбинации GAMMA XXL LF-W / EN 200 / диспенсер воронок [08]	X-095.12.007
Монтажная панель для комбинации GAMMA XXL LF-WB / корзина для манжет / EN 200 / диспенсер воронок [09]	X-095.12.008

* без инструментов

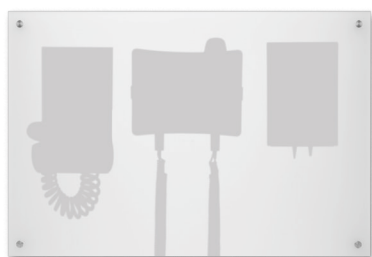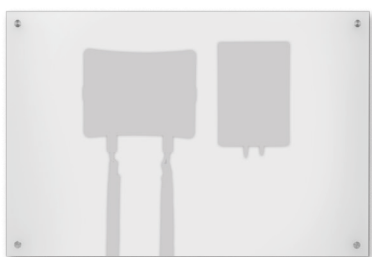

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE. Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.



Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры. Для получения подробной информации посетите сайт www.heine.com.

Условия гарантии для отдельных продуктов:

Дерматоскоп HEINE iC1

HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если продукт был приобретен у авторизованного дилера и зарегистрирован в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите по ссылке www.heine.com/register. Гарантия распространяется на дефекты конструкции, материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на аккумулятор и чехол для мобильного телефона.

Фиброоптические ларингоскопы HEINE

Клиники ларингоскопа имеют расширенную 10-летнюю гарантию на отсутствие дефектов материала, обработки и изготовления, для лезвий, изготовленных 01.01.2020 или позже или с серийным номером SN1105228000 или выше. Предоставляется 10-летняя гарантия того, что выходная мощность не упадет ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирувания (из расчета 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Гарантия распространяется на лезвия ларингоскопа HEINE Classic+ после очистки, дезинфекции и/или стерилизации, в соответствии с инструкциями по переработке. На ларингоскопические лезвия HEINE Classic+ F.O., изготовленные до 01.01.2020, и на лезвия FlexTip+ распространяются те же условия гарантии, которые указаны выше, с 5-летним гарантийным периодом.

HEINE GAMMA G-series

На сфигмоманометры HEINE Gamma G7 и HEINE Gamma XXL LF распространяется расширенная гарантия – 10 лет на отсутствие дефектов материала, обработки и конструкции. Изнашиваемые детали и метрологический контроль не включены.

*HEINE Cube

На Cube HEINE предоставляется гарантия 2 года.

* Видеоларингоскоп HEINE visionPRO

На видеоларингоскоп HEINE visionPRO компания HEINE предоставляет 2-летнюю гарантию.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

Уважаемые коллеги!

Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты и оборудование производства HEINE.

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE.

Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:

- эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
- включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это персоналом;
- использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов;
- проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, умышленная порча;
- повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.

Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона завода-изготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию TTT HealthCare GmbH: info@ttt-gmbh.com